

MagHealy

Gdzie moc pola magnetycznego spotyka się z holistycznym dobrostanem.

Najnowsza innowacja Healy World wspiera Cię w harmonizowaniu Twojego otoczenia poprzez emisję pola magnetycznego. Poznaj MagHealy; lekki, przenośny i dyskretny, tworzy pozytywną energię wszędzie tam, gdzie jesteś. Dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii w dyspozycji Healy World oraz ponad 100 dostępnych programów częstotliwości pola magnetycznego zebranych w różnych niepowtarzalnych rodzajach aplikacji i modułach, co czyni MagHealy wszechstronną innowacją.

Zalety urządzenia MagHealy


- Lekkie, przenośne i kompaktowe
- Tworzy pozytywną energię, gdziekolwiek jesteś
- Harmonizuje otoczone poprzez emisję pól magnetycznych o częstotliwościach analizowanych kwantowo (QAF)¹
- Wykorzystuje podwójne częstotliwości (aplikacja McMakin)
- Może być używane w tandemie z urządzeniem Healy
- Zakres częstotliwości: 0 – 12,5 MHz



Wrażenia z MagHealy

dla ciała, umysłu i środowiska

Impulsy MagHealy sięgają na odległość do 3 metrów.
To pozwala cieszyć się działaniem pola magnetycznego
w Twoim całym otoczeniu.

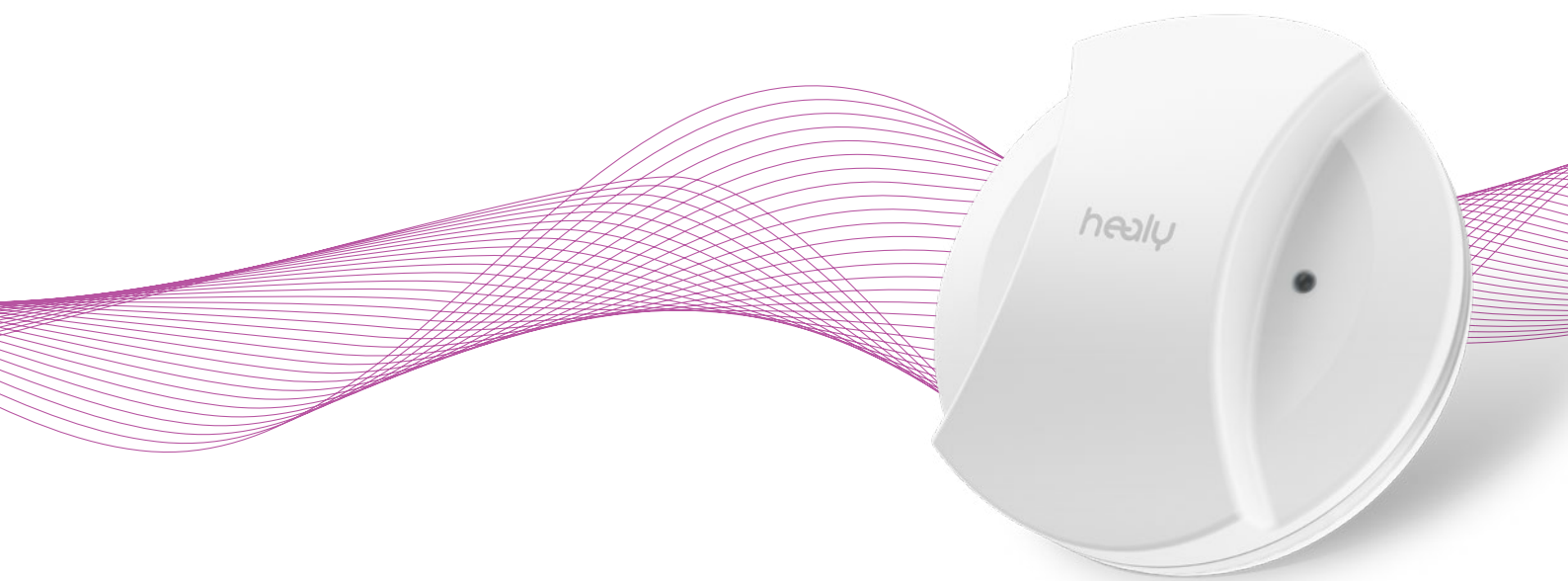

Ciche w użycie, wygodne w pracy



Wyjątkowe działanie, intuicyjna obsługa

MagHealy to inteligentne urządzenie bezprzewodowe. To lekkie i przystosowane do podróży urządzenie zostało stworzone, aby poprawiać samopoczucie poprzez Twoje urządzenie mobilne z wykorzystaniem aplikacji Healy.



Jedno urządzenie, cztery innowacje

MagHealy oferuje cztery wyjątkowe i potężne moduły: Classic, Water, Atmosphere i McMakin. Wybierz indywidualne wsparcie do różnych sytuacji.



Wspieraj swoje zwierzęta lub rośliny

Zwierzęta domowe i rośliny również mogą cieszyć się korzyściami zapewnianymi przez aplikację MagHealy Water. Wykorzystaj to, aby pozytywnie wpłynąć na swoje otoczenie.

Aplikacja MagHealy Classic

Programy MagHealy Classic

Moc pól magnetycznych

Programy MagHealy Classic zapewniają aplikację rezultatów pola magnetycznego wykorzystującą najnowocześniejszą technologię Healy oraz częstotliwości analizowane kwantowo (QAF)¹.

Dzięki 14 wyjątkowym programom QAF i pola magnetycznego, aplikacja Classic to idealne rozwiązanie w różnorodnych sytuacjach.

Program aplikacji Classic są przeznaczone do promowania zwiększonego relaksu, regeneracji i równowagi witalnej – należy je stosować lokalnie do konkretnych części ciała. Dodaj swojemu życiu mocy z pomocą MagHealy.



Odkryj najważniejsze programy



Regeneracja

Odnowienie pola bioenergetycznego ciała, umysłu i ducha



Witalność

Przywracanie witalności pola bioenergetycznego.



Zmęczenie

Energetyzacja pola bioenergetycznego w przypadku zmęczenia.



Krążenie energii

Harmonizacja krążenia energii bioenergetycznych



Pozytywny nastrój

Harmonizacja nastroju w przypadku braku równowagi emocjonalnej



Ciśnienie

Wolność od zewnętrznych i wewnętrznych nacisków

Ma oparcie w danych liczbowych!


Badanie MagHealy Classic*

W badaniu przeprowadzonym dla dwóch programów MagHealy Classic „Pozytywny nastrój” i „Regeneracja” zaobserwowano u uczestników poprawę samopoczucia średnio o 57% oraz zmniejszenie się obaw o średnio 32%. Ocena wskaźnika wypalenia dała wyniki spadku średnio o 28%, a wskaźnik aktualnego nastroju wzrósł średnio o 44%.


Wielkość efektu tego badania była duża dla spadku wskaźnika wypalenia i bardzo duża dla poprawy samopoczucia, spadku obaw oraz wzrostu wskaźnika aktualnego nastroju.



Porównanie po/przed działaniem MagHealy Classic

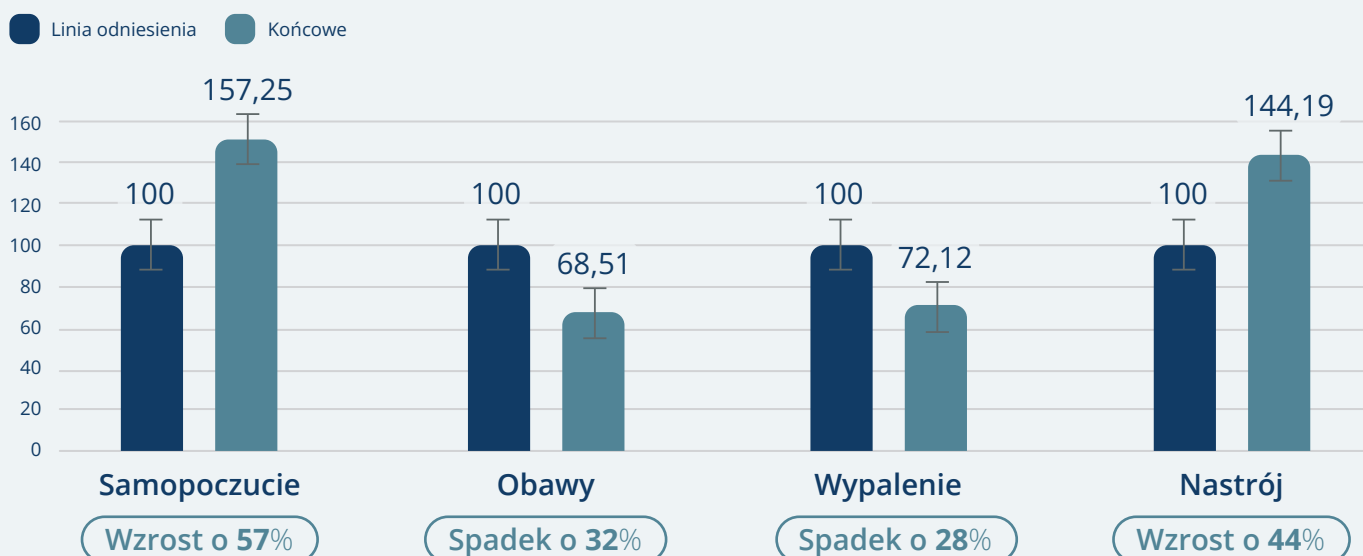

Wielkość efektu (d Cohena)

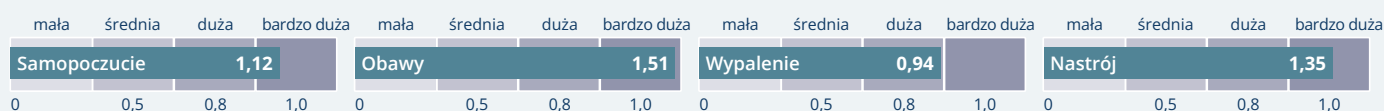

* Zapoznaj się z pełnymi wynikami badania na stronie: www.healyworld.net/MagHealy/studies

Aplikacja MagHealy Atmosphere

Programy MagHealy Atmosphere

Zmienianie przestrzeni

Programy MagHealy Atmosphere tworzą pulsujące pole magnetyczne, które ma zasięg nawet do półtora metra w całym pomieszczeniu we wszystkich kierunkach, rozchodząc się przez atmosferę i przestrzeń.

Oparta na 24 programach częstotliwości analizowanych kwantowo (QAF) aplikacja MagHealy Atmosphere została zaprojektowana w celu wygenerowania przestrzeni energetycznej, która tworzy harmonijne warunki do działania w dowolnym otoczeniu – samodzielnie lub w grupie.



Wskazówki dla biura

Po prostu połóż swoje urządzenie MagHealy na biurku, aby doświadczyć harmonijnej atmosfery zachęcającej do działania. Popraw nastrój, który towarzyszy spotkaniom dla wszystkich osób w pomieszczeniu.

Odkryj najważniejsze programy



Kreatywność

Wspiera właściwe środowisko dla kreatywnych myśli i pomysłów poprzez harmonizację pola energetycznego



Biuro

Optymalizacja przestrzeni w środowisku pracy, aby poprawiać wyniki, pracę zespołową i koncentrację.



Harmonia rodzinna

Harmonizacja przestrzeni życiowej w celu wspierania pozytywnego środowiska energetycznego dla całej rodziny.



Sleep

Umieszczone w miejscu, w którym śpisz, harmonizuje jin i jang, wspierając równowagę w trakcie snu.



Oczyszczanie energii

Harmonizacja pamięci energetycznej przestrzeni w celu zrównoważenia negatywnych częstotliwości.



Związki

Delikatne zrównoważenie otaczającej przestrzeni w celu energetycznego sprzyjania związkom pełnym miłości



Dostępne jako
Subskrypcja

Liczby mówią same za siebie


Badanie MagHealy Atmosphere*

W badaniu przeprowadzonym dla programów MagHealy Atmosphere „Zdrowie holistyczne” i „Sen” zaobserwowano u uczestników poprawę samopoczucia średnio o 48% oraz zmniejszenie się obaw o średnio 37%.


Wielkość efektu w tym badaniu była duża dla poprawy samopoczucia oraz bardzo duża dla spadku obaw.



Porównanie przed działaniem / po działaniu MagHealy Atmosphere

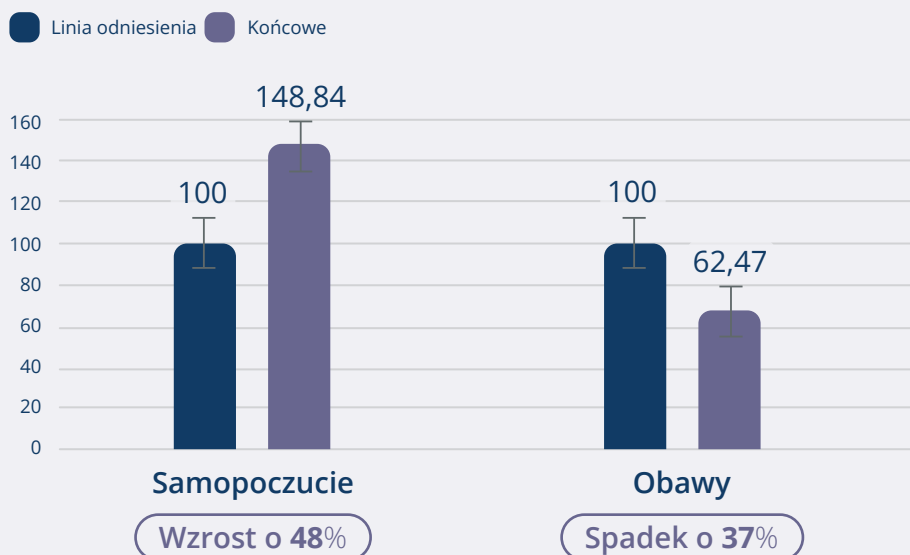

Wielkość efektu (d Cohena)

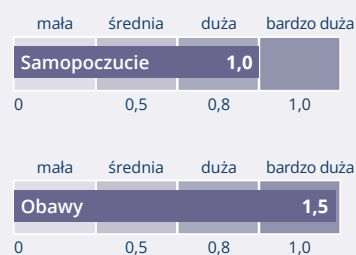

* Zapoznaj się z pełnymi wynikami badania na stronie: www.healyworld.net/MagHealy/studies



Wskazówka dot. dobrego samopoczucia

Zabierz ze sobą MagHealy na siłowni – w trakcie ćwiczeń użyj programu QAF „Workout”, aby utworzyć zharmonizowaną otaczającą przestrzeń i pole energetyczne dla wydolności fizycznej.

Czy wiesz?

Dzielenie się jest wyrazem troski.

Aplikacje pola magnetycznego MagHealy nie ograniczają się do istot ludzkich. Wykorzystaj program QAF „Animal Harmony”, aby przywitać swoje czworonożne futrzaki w przestrzeni zoptymalizowanej pod kątem wspierającej i pozytywnej energii.

Aplikacja MagHealy Water

Programy MagHealy Water Źródło życia

W Healy World postrzegamy wodę jako materialną formę pola informacyjnego, która składa się z cząsteczek o ładunku elektrycznym zawierających wszelkie informacje potrzebne do życia. Taka perspektywa określa bardzo konkretny zakres częstotliwości, dzięki któremu możliwe było pojawienie się życia na planecie.

Aplikacja MagHealy Water zapewnia 24 grupy programów częstotliwości analizowanych kwantowo (QAF) do informowania wody pitnej poprzez emitowanie pól magnetycznych. Ta wyjątkowa aplikacja została opracowana, aby sprzyjać przede wszystkim krążeniu energii, transportowi składników odżywczych i metabolizmowi komórkowemu.



Odkryj najważniejsze programy



Harmonia komórkowa

Modyfikacja spójnej kwantowej struktury wody w celu harmonizacji pola bioenergetycznego komórek



Transport substancji odżywczych

Modyfikacja spójnej kwantowej struktury wody w celu harmonizacji pola bioenergetycznego, aby zapewnić optymalne środowisko do transportu substancji odżywczych



Krążenie energii lokalne/systemowe

Modyfikacja spójnej kwantowej struktury wody w celu harmonizacji lokalnego/ogólnego krążenia energii pola bioenergetycznego



Jasność umysłu

Modyfikacja spójnej kwantowej struktury wody w celu harmonizacji pola bioenergetycznego, aby zapewnić zoptymalizowaną jasność



Detoks bioenergetyczny

Modyfikacja spójnej struktury kwantowej wody w celu wspierania oczyszczania pola bioenergetycznego



Bioenergetic Defense

Modyfikacja spójnej kwantowej struktury wody w celu harmonizacji i wzmocnienia pola bioenergetycznego



Dostępne jako
Subskrypcja

To więcej niż woda!


Badanie MagHealy Water*

W badaniu przeprowadzonym dla programów MagHealy Water „Fitness”, „Energia” i „Harmonia komórkowa” zaobserwowano u uczestników poprawę samopoczucia średnio o 50% oraz zmniejszenie się obaw o średnio 33%.


Wielkość efektu dla tego badania była bardzo duża dla zmniejszenia obaw.



Porównanie przed działaniem / po działaniu MagHealy Water

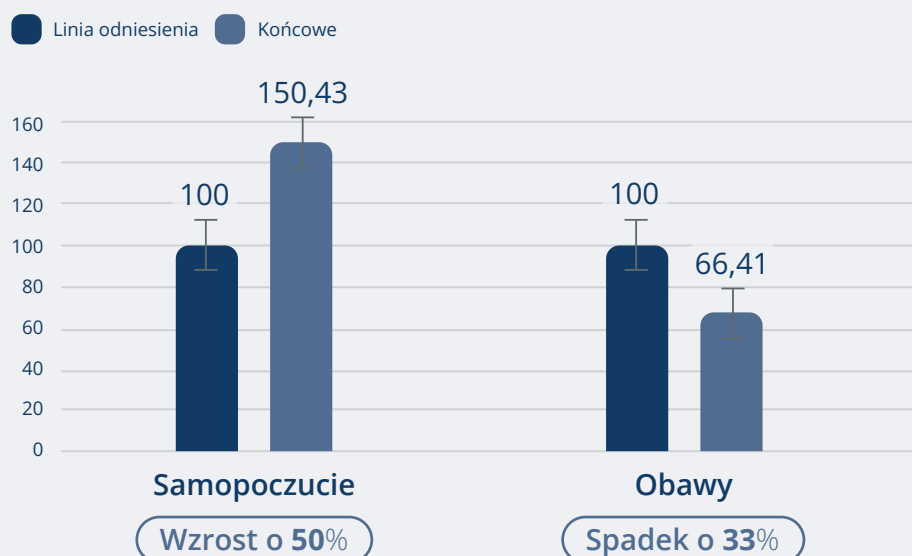

Wielkość efektu (d Cohena)

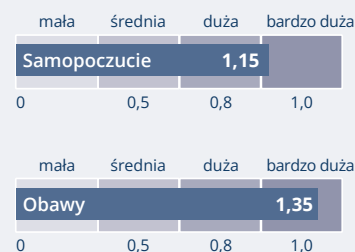

* Zapoznaj się z pełnymi wynikami badania na stronie: www.healyworld.net/MagHealy/studies



Wskazówka dot. dobrego samopoczucia

Weź ze sobą wodę wypełnioną informacjami z programu QAF „Fitness”, aby mieć wsparcie w aktywnościach fizycznych każdego rodzaju i w biegu. Oprócz innych czynników odpowiednie nawodnienie koreluje ze wsparcie mięśni.



Czy wiesz?

Jak mieć rękę do roślin. Twoje rośliny czerpią korzyści z wody wypełnionej informacjami przez MagHealy. Użyj na przykład programu QAF „Rośliny”, aby zapewnić pozytywny wpływ dla ich środowiska, wspierając dystrybucję i transport wody.

Aplikacja MagHealy McMakin

Programy MagHealy McMakin Potęga interferencji

Wykorzystanie dwóch równoległych pól magnetycznych powoduje interferencję dwóch zbieżnych częstotliwości – to właśnie nazywamy aplikacją MagHealy McMakin, nazwaną na cześć Carolyn McMakin DC.

Programy MagHealy McMakin wykorzystują pary konkretnych częstotliwości naczyniowych na harmonizowanie pola bioenergetycznego, tworząc tak zwane pole magnetyczne o określonej częstotliwości (FSMF – Frequency Specific Magnetic Field). Pierwsza częstotliwość w każdej z par jest nakierowana na rodzaj zaburzenia równowagi, natomiast druga wskazuje dokładnie lokalizację zaburzenia równowagi w polu bioenergetycznym (np. wątrobę). Każdy z 24 programów McMakin opiera się na złożonej sekwencji takich par.

Odkryj najważniejsze programy



Komfort ciała

Harmonizacja pola bioenergetycznego rdzenia kręgowego.



Harmonia skóry

Harmonizacja pola bioenergetycznego skóry w celu regeneracji energetycznej.



Harmonia karku

Harmonizacja pola bioenergetycznego układu mięśniowo-szkieletowego.



Harmonia dolnych pleców

Harmonizacja pola bioenergetycznego układu mięśniowo-szkieletowego.



Harmonia mózgu

Harmonizacja świadomości, wzmocnienie poczucia spójności oraz harmonizacja traum bioenergetycznych.



Harmonia trawienia

Harmonizacja energetyczna aktywności metabolicznej w polu bioenergetycznym układu trawiennego.



Ekspertka odpowiednia za aplikację

Carolyn McMakin jest lekarką-chiropraktyczką, amerykańską edukatorką, badaczką i pionierką w dziedzinie interferencji częstotliwości dualnych oraz współtwórczynią MagHealy.



Dostępne jako
Subskrypcja


Współtworzone z naukowcami, sprawdzone w praktyce! **Badanie MagHealy McMakin***

W badaniu przeprowadzonym dla programów MagHealy McMakin „Harmonia mózgu” i „Harmonia nerwu błędnego” zaobserwowano u uczestników poprawę samopoczucia średnio o 44% oraz zmniejszenie się obaw o średnio 37%.


Wielkość efektu w tym badaniu była duża dla poprawy samopoczucia oraz bardzo duża dla spadku obaw.



Porównanie przed działaniem / po działaniu MagHealy McMakin

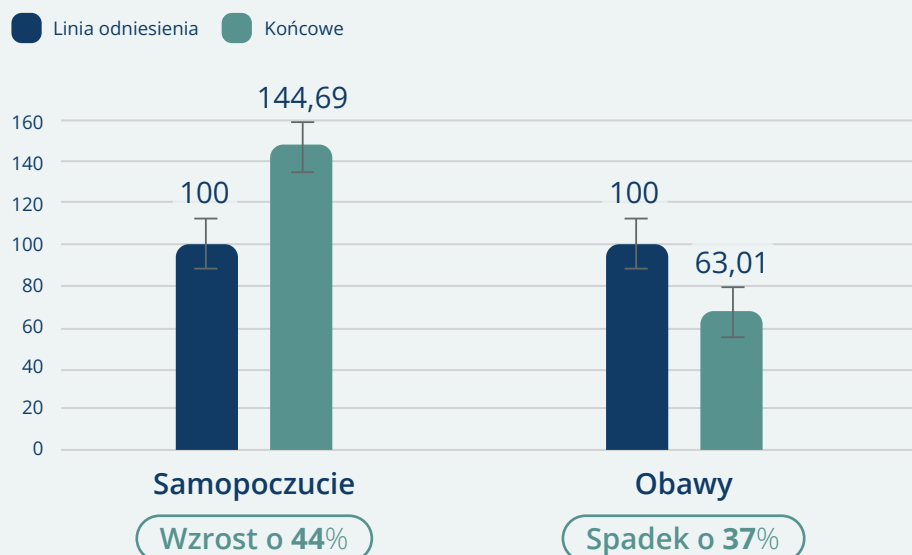

Wielkość efektu (d Cohena)

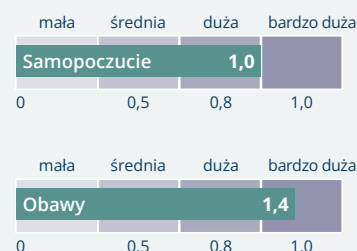

* Zapoznaj się z pełnymi wynikami badania na stronie:
www.healyworld.net/MagHealy/studies



Czy wiesz?

Metoda mikroprądów o zdefiniowanych częstotliwościach (FSM) została opracowana w 1995 roku przez Carolyn McMakin, która zaczęła jej nauczać w 1997 r.

FSM wykorzystuje równoległe dwa wyjścia stymulujące, w których mikroprądy o modulowanych częstotliwościach są transmitowane do organizmu za pośrednictwem elektrod. Obejmuje to też wykorzystanie interferencji częstotliwości. Medium dla FSM mogą być albo mikroprądy (przez kable) lub (w przypadku bezprzewodowego MagHealy) pola magnetyczne.

Wybierz MagHealy Edition odpowiadającą Twoim potrzebom

Niezależnie od tego czy szukasz pełnego planu na całe życie z wersją MagHealy Pro czy okazji, aby poprobować różnych subskrypcji z wersją MagHealy Discover, mamy coś dla Ciebie. Wybierz wersję MagHealy Edition, która jest odpowiednia dla Ciebie.

Idź na całość z **MagHealy Pro**


MagHealy Pro daje Ci tylko to, co najlepsze. To rozwiązanie wszechstronne, które obejmuje niesamowitą liczbę 86 niepowtarzalnych programów częstotliwości pola magnetycznego, pochodzących z oryginalnych aplikacji MagHealy: Classic, Atmosphere, Water i McMakin.

Wypróbuj MagHealy, gdzie moc pola magnetycznego spotyka się z holistycznym dobrostanem. Przejdź na wersję Professional, przenosząc siebie i swoje otoczenie na wyższy poziom.



MagHealy **Pro**

- „4 w 1” – jedno urządzenie, cztery innowacyjne aplikacje
- Skorzystaj z wyboru łącznie 86 unikalnych programów częstotliwości pola magnetycznego
- Harmonizacja dla ciała, umysłu i środowiska

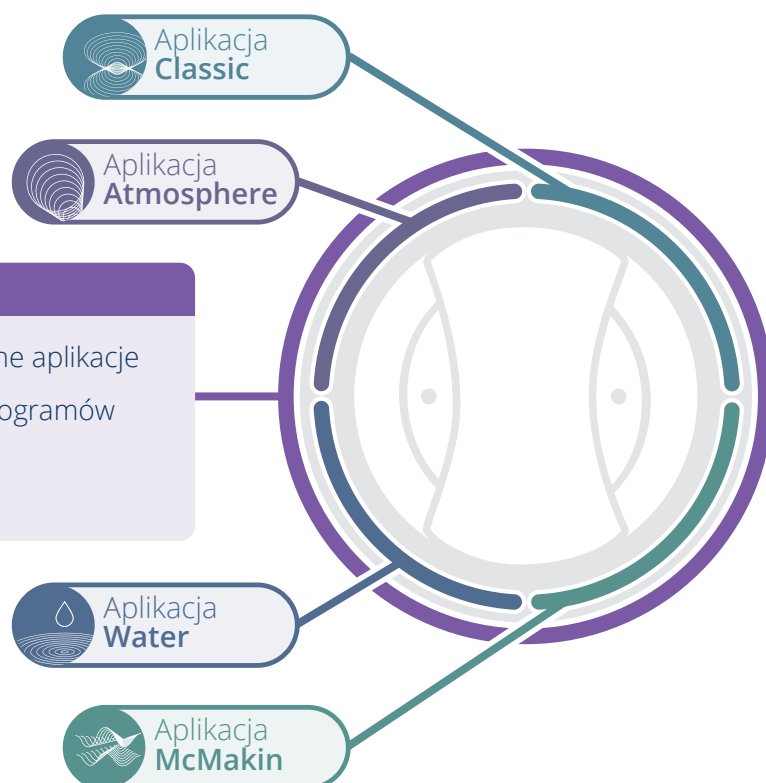


Wszechstronność w dłoni dzięki MagHealy Discover i Evolve

MagHealy Discover to zaledwie początek przyjemnego korzystania z rozwiązań dostosowanych do Twoich potrzeb w zupełnie nowym modelu subskrypcji MagHealy. Uzyskaj dostęp na całe życie do aplikacji Classic. To dobry fundament, na który możesz dokładać wybrane przez siebie dodatkowe subskrypcje.

Spersonalizuj swoje wrażenia z modelem subskrypcji MagHealy

Oprócz aplikacji Classic masz do dyspozycji aplikacje MagHealy Atmosphere, Water i McMakin w formie subskrypcji na okres jednego, trzech, sześciu lub dwunastu miesięcy. Dzięki MagHealy Evolve możesz zatrzymać jedną z tych aplikacji jako stały dodatek do swojego urządzenia, aby zawsze była pod ręką, kiedy jej potrzebujesz!

Decyzja należy do Ciebie

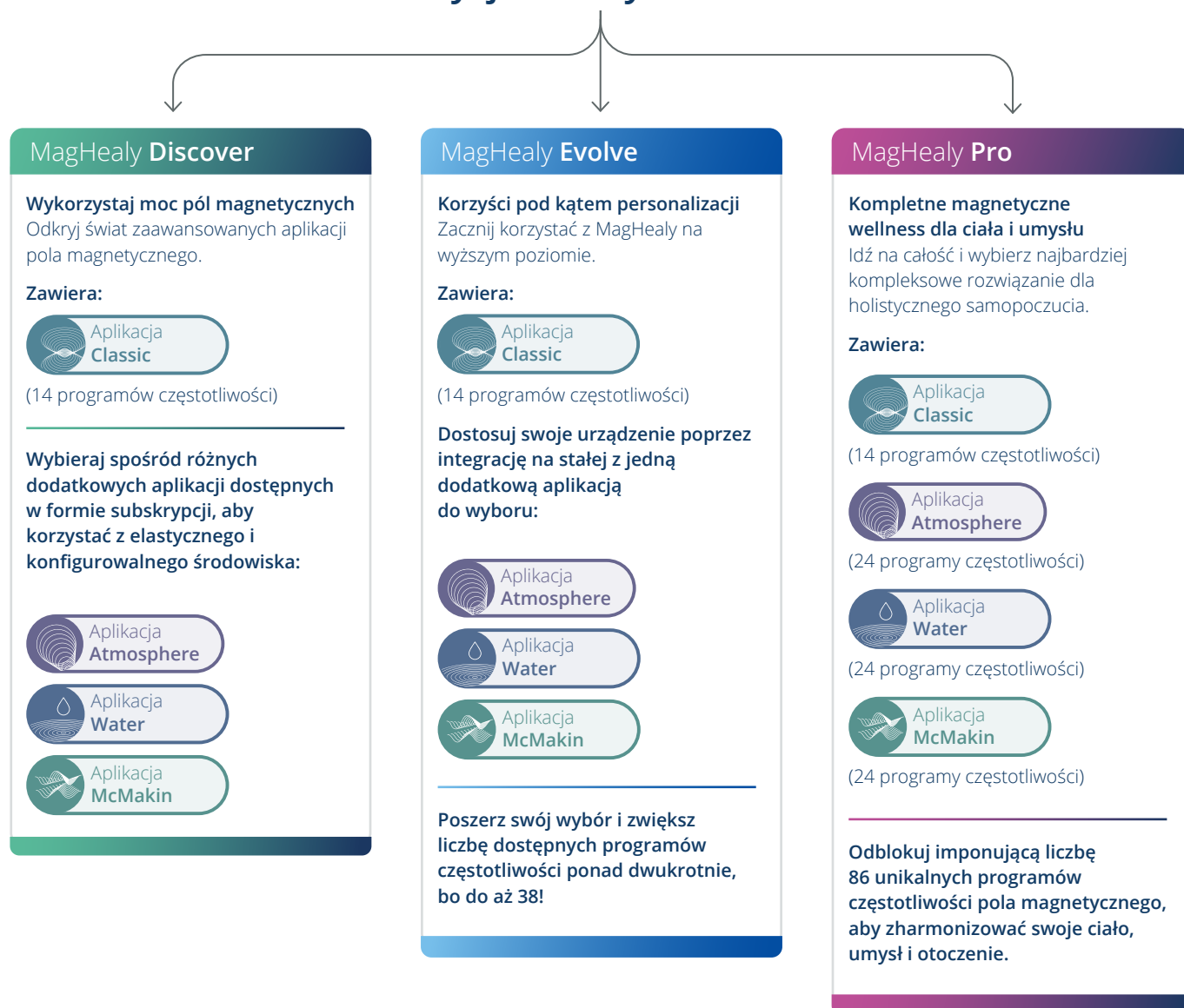




NOWOŚĆ

Odkryj najnowsze innowacje produktowe przeznaczone dla MagHealy

HealAdvisor Analize Moduł Meridian

Gdzie tradycyjna chińska wiedza spotyka najnowocześniejszą technologię Healy

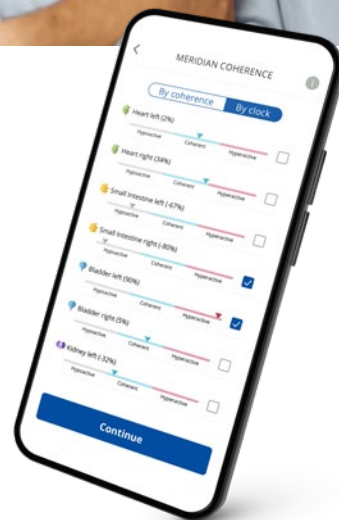

Wznieś się na kolejny poziom samopoczucia z pomocą Modułu Meridian HealAdvisor Analize – sposobu na osiągnięcie najwyższej harmonii.

Odkryj przełomową podróż ku harmonizacji swoich meridianów zgodnie ze starożytną wiedzą i uwolnij swój potencjał. Moduł Meridian jest kompasem prowadzącym do życia w idealnej równowadze.

Odkrywaj sekrety swoich meridianów, wykorzystuj potencjał kwantowy i przyjmij przepływ życiowej energii z pomocą modułu Meridian. Poczuj niezrównaną vitalność!

Używaj analizy pola informacyjnego za pomocą urządzenia MagHealy – funkcji dostępnej dotychczas wyłącznie w urządzeniu Healy

Korzyści w skrócie

Harmonizuj swoje meridiany i przywróć vitalność swojemu samopoczuciu!


- **Wykrywaj blokady energetyczne:** sprawdź za pomocą analizy, co blokuje Twoje ścieżki energetyczne, oddalając cię od stanu idealnego przepływu.
- **Zrozum swoje ciało:** uzyskaj informacje na temat punktów akupunktury, które stanowią klucz do harmonizacji i równowagi.
- **Poznaj punkty akupunktury:** w łatwy sposób przeprowadź pogłębioną analizę najbardziej odpowiednich punktów akupunktury, korzystając z obszernej bazy danych dla konkretnych meridianów.
- **Kontroluj swoje holistyczne samopoczucie:** osiągnij zrozumienie przyczyn zaburzeń równowagi i znajdź skuteczne rozwiązania dzięki 12 programom częstotliwości analizowanych kwantowo (QAF) do meridianów.
- **Korzystaj ze spersonalizowanych rekomendacji:** uzyskaj dostosowane zalecanie programów meridianów na urządzenie Healy lub MagHealy, dzięki czemu masz pewność, że Twoja podróż jest unikalna.

Moduł Meridian HealAdvisor Analyse

Odblokowanie przepływu energii ciała

Starożytne nauki o meridianach i akupunkturze sięgają 2500 lat wstecz. To jedne z najstarszych praktyk tradycyjnej chińskiej wiedzy. Istnieje przekonanie powstałe na podstawie tych wieloletnich koncepcji, że ciało ma dwanaście głównych ścieżek energetycznych zwanych meridianami. Każdy meridian jest połączony z konkretnym narządem lub układem funkcjonalnym ciała.

Wzdłuż tych ścieżek energetycznych znajdują się punkty akupunktury niczym koraliki nanizane na sznurek. Każdy z nich ma swoiste połączenie z określonym narządem.

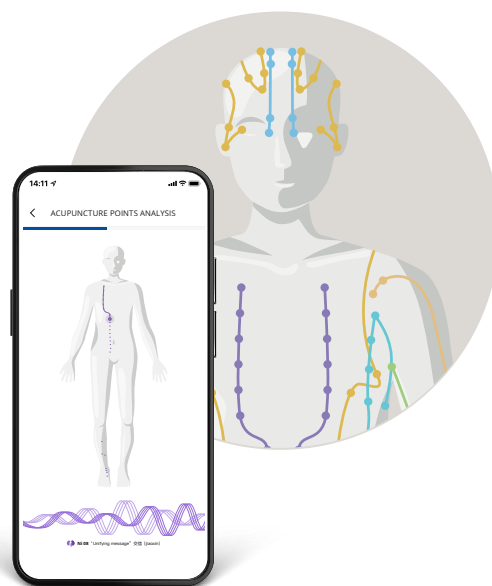

Zaawansowane podejście do najbardziej zaawansowanej na świecie analizy pola informacyjnego

Najnowocześniejsza technologia Healy World przenosi analizę pola informacyjnego na zupełnie nowy poziom. Urządzenie MagHealy wykorzystuje nie jeden, ale dwa czujniki rezonansu do wykrywania blokad ścieżek energetycznych.

Wejdź do świata innowacji z modułem Meridian HealAdvisor Analyse dla urządzenia MagHealy – rewolucyjnego podejścia, które zmienia zasady gry.

Czy wiesz?

Niezależnie od tego, którą edycję MagHealy posiadasz, możesz teraz korzystać w lepszy sposób z modułu Meridian, jako dodatku do swojego urządzenia.

5 kroków do idealnej równowagi

Odkryj przewodnik krok po kroku na temat harmonizacji swoich meridianów

1

Sprawdzanie meridianów

Analizuj spójność wszystkich meridianów w polu informacyjnym.

2

Ocena punktu

Analizuj najbardziej odpowiednie punkty akupunktury na niespójnych meridianach, aby określić kluczowe z nich.

3

Ocean danych

Przeprowadź pogłębioną analizę w polu informacyjnym za pomocą baz danych dla meridian do harmonizacji.

4

Podдай vibracjom nowe informacje

Wspieraj równowagę meridianów o największym stopniu jej zaburzenia.

5

Szukanie rezonansu

Analizuj rezonans programów Meridian dla Healy i MagHealy w polu informacyjnym, aby wspierać meridiany.



Przywróć naturalną równowagę swoim meridianom za pomocą aplikacji **MagHealy Meridian**

Tradycyjne nauczanie o meridianach mówi nam o ścieżkach energetycznych, o podstawowym znaczeniu dla naszej równowagi, gdy są niezablokowane.

Zakłócenia i blokady wewnętrznego przepływu energii mogą być prowadzić do dyskomfortu. To na tych wszystkich specyficznych punktach wzdłuż meridian dzieje się magia. Stymulacja tych punktów może dogłębnie wpłynąć na przepływ Chi, przybliżając nas do stanu równowagi i dobrego samopoczucia.

12 holistycznych rozwiązań dla 12 meridianów

Odblokuj swoją witalność z pomocą dynamicznego zestawu narzędzi – 12 programów QAF do MagHealy, zaprogramowanych starannie dla każdej z 12 meridianów. Przywróć równowagę i wprowadź w swoje życie odzyskane wigor i witalność.

Zegar narządów: synchronizuj swoje samopoczucie

Każdy meridian ma konkretny okres aktywności, zgodnie z tzw. „zegarem narządów”. Echa tej koncepcji znajdują odbicie we współczesnej chronomedycynie, w ramach której badany jest optymalny czas na przyjmowanie konkretnych leków.

Każdy meridian niezauważalnie oplata narząd lub układ organizmu i jest zgodny z jednym z pięciu żywiołów: drewnem, ogniem, ziemią, metalem i wodą.

Programy MagHealy Meridian – w skrócie

Yin



Płuco



Serce



Osierdzie



Śledziona –
trzustka



Nerka



Wątroba

Yang



Jelito grube



Jelito cienkie



Woreczek
żółciowy



Pęcherz moczowy



Żołądek



Potrójny
ogrzewacz

Starożytne nauki zweryfikowane przez współczesną technikę!


Badanie nad modułem Meridian do MagHealy*

W badaniu nad modułem Meridian aplikacji HealAdvisor Analyse zaobserwowana znaczną poprawę wśród uczestników. Średnio zgłosili wzrost ogólnego samopoczucia o 50%, poprawę jakości życia o 25% oraz zmniejszenie obaw o 37%.

Badanie odkryło, że wpływ był znaczny, z „dużą” wielkością efektu w zakresie poprawy jakości życia, a nawet „bardzo dużą” dla poprawy samopoczucia i zmniejszenia obaw.



Porównanie przed działaniem / po działaniu modułu Meridian do MagHealy

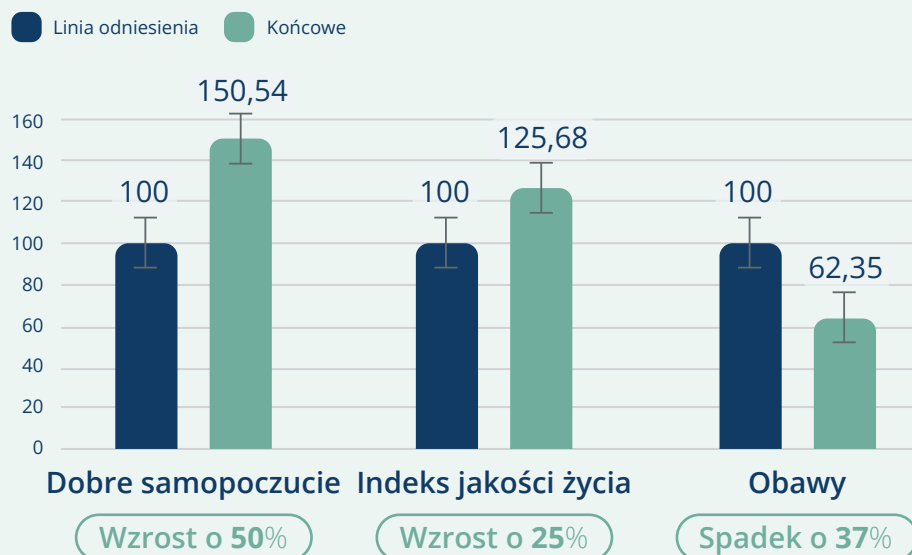

Wielkość efektu (d Cohena)

	mała	średnia	duża	bardzo duża
Dobre samopoczucie			1,2	
Obawy			1,4	
Indeks jakości życia			1,0	

* Zapoznaj się z pełnymi wynikami badań na stronie: www.healyworld.net/MagHealy/studies

Podziel się darem dobrego samopoczucia

Moc MagHealy nie ogranicza się tylko do Ciebie. To dar, którym możesz dzielić się z bliskimi i wspólnie z nimi odkrywać przemianę.


Przenieś swoją drogę do dobrego samopoczucia na wyższy poziom dzięki MagHealy. Czas sięgnąć do pełnego potencjału i przyjąć życie pełne równowagi, witalności i dobrego samopoczucia!



Co jest w pudełku?

Zestaw idealny!

Urządzenie MagHealy jest dostarczane w opakowaniu zaprojektowanym w wyjątkowy sposób, a to, co znajduje się wewnątrz, jest równie imponujące. Oprócz urządzenia MagHealy w środku znajduje się pudełko z kompatybilnymi akcesoriami, w tym ładowarka indukcyjna, kabel do ładowania USB-C oraz instrukcja zapewniająca łatwy start.

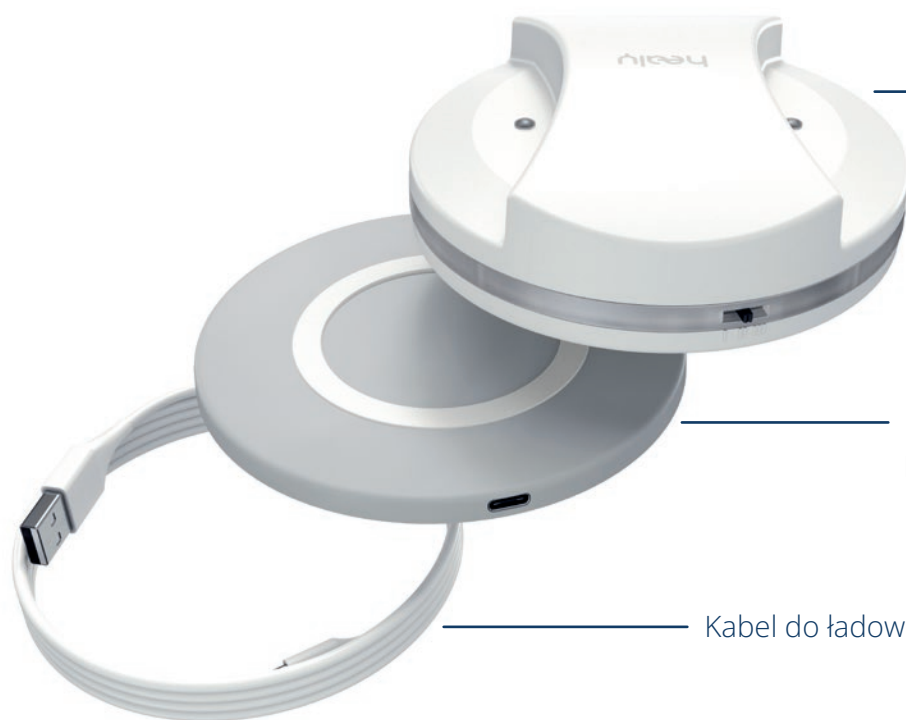

Bezprzewodowe urządzenie
MagHealy

Ładowarka indukcyjna
MagHealy

Kabel do ładowania USB

Wszystkie elementy mogą pochwalić się stylowym wyglądem, są spójne pod tym względem, dzięki czemu MagHealy jest zawsze w centrum uwagi, tak jak być powinno.



Holistyczne samopoczucie w zasięgu jednego przycisku

Pobierz aplikację Healy i ciesz się nową
jakością dobrego samopoczucia.



@healyworldofficial



Dołącz do naszej rozwijającej się społeczności

Otwórz się na nowe możliwości rozwoju
i nieograniczony potencjał.

Healy International B.V. | www.healy.world

Paterswoldseweg 806 | BM 9728 Groningen | Netherlands



@healyworldofficial



Frequencies for Your Life

¹ „Quantum Analyzed Frequencies (QAF)” to zastrzeżona technologia należąca do firmy Healy World. Wykorzystuje dane z fizycznego generatora szumu, aby przypisać priorytet częstotliwościom, które według doświadczenia profesjonalistów mają największe znaczenie dla użytkownika. Czas trwania, częstotliwość, intensywność, częstość, nazewnictwo oraz opisy programów Quantum Analyzed Frequency (QAF) bazują na praktycznym doświadczeniu specjalistów oraz naszego rozumienia oddziaływania pól magnetycznych o modulowanej częstotliwości z polem bioenergetycznym. Nie zostały one potwierdzone przez niezależne badania. Programy Quantum Analyzed Frequency (QAF) w MagHealy zostały stworzone, aby wspierać dobre samopoczucie przez harmonizację pola bioenergetycznego. Przeprowadziliśmy otwarte ankiety przed/po w kontrolowanych i randomizowanych grupach uczestników. Wyniki ankiet wskazują, że samopoczucie uczestniczących osób było lepsze po zastosowaniu programu. Przypisujemy to harmonizacji pola bioenergetycznego, które określamy jako przepływ energii życiowej, tradycyjnie nazywanej również Chi (lub Qi) albo praną. Nie zostało to potwierdzone przez niezależne badania.

Uwaga:

Programy pól magnetycznych urządzeń MagHealy nie mają zastosowania medycznego. Ich zadaniem nie jest leczenie, terapia, łagodzenie czy diagnostyka chorób lub stanów medycznych ani zapobieganie im. Terminy używane w tych programach nie stanowią oświadczeń o ich działaniu. Celem tych programów jest zapewnienie użytkownikowi narzędzia do odkrywania opcji aplikacji. Programów MagHealy nie należy traktować jako odpowiednika profesjonalnej porady medycznej, diagnozy czy terapii. Takich porad udzielają wykwalifikowane osoby z wykształceniem medycznym. Jeśli podejrzewasz, że cierpisz na jakąś chorobę lub jeśli jesteś pod opieką lekarza bądź innego specjalisty ds. zdrowia, zasięgnij jego porady przed zastosowaniem MagHealy. Zawsze używaj swojego MagHealy zgodnie z instrukcją użytkownika.

Zastrzeżenie:

Nauka nie uznaje istnienia pola informacyjnego, jego analizy, harmonizacji oraz innych znaczeń ze względu na brak dowodów naukowych. Programy Individualized Microcurrent Frequency (IMF) w urządzeniach Healy, QPF (częstotliwości potencjału kwantowego) w Healy Coil oraz programy pola magnetycznego w urządzeniach MagHealy nie są uznawane przez medycynę konwencjonalną ze względu na brak dowodów naukowych w rozumieniu medycyny konwencjonalnej. Informacje na niniejszych stronach mają charakter wyłącznie poglądowy i służą celom informacyjnym. Chociaż Healy World dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte na tych stronach były aktualne, nie udziela żadnych gwarancji co do dokładności, przydatności czy też aktualności podanych informacji. Healy World nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty lub szkody wynikające z wykorzystania informacji zamieszczonych na tych stronach. Wszystkie informacje są przedstawione zgodnie z ich stanem, a odpowiedzialność za ich interpretację i wykorzystanie spoczywa wyłącznie na użytkowniku. Stosowanie produktów, programów i informacji Healy World odbywa się wyłącznie na własne ryzyko użytkownika, według jego uznania i niezależnej oceny. Firmy Healy World w szczególności zrzekają się odpowiedzialności za decyzje użytkownika związane z używaniem produktów i usług Healy World, które są poza zakresem Instrukcji użytkownika oraz instrukcji dostarczonej przez firmę.